

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



**BIDANG REHABILITASI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NTB**

Nomor SOP	SOP/ 215 / 11 /KA/Rh.00.01/2024/BNNP
Tanggal Pembuatan	01 April 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	<p>Kepala BNNP NTB</p> <p><u>Gagas Nugraha, S.H., S.I.K., M.M., M.H</u> NRP. 67050428</p>
Nama SOP	Pemeriksaan Kimia Darah (POCT)

## Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atau Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
5. Peraturan Menteri Kesehatan No 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik

## Keterkaitan:

1. SOP cuci tangan

## Peringatan:

Jika tidak ada koordinasi dengan unit terkait, maka akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan SOP ini.

## Kualifikasi pelaksana:





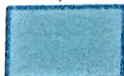
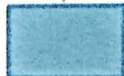
1. Perawat
2. Dokter umum




## Peralatan/ perlengkapan:

Alat tes kimia darah *POCT*, *glucose stick*, *cholesterol stick*, *uric acid stick*, *alcohol swabs*, *safety box*, *lancet*.

## Pencatatan/ pendataan:

- Rekam medis

NO	URAIAN KERJA	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Perawat	Dokter	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan seluruh perlengkapan yang diperlukan.			Alat tes kimia darah POCT, glucose stick/cholesterol stick/uric acid stick, alcohol swabs, safety box, lancet.	5 Menit	Bukti tindakan	
2.	Memasukkan tes strip untuk mengaktifkan alat sehingga muncul nomor kode			Alat tes kimia darah POCT.	1 menit	Idem	
3.	Petugas mengecek kesesuaian nomor kode pada layar dengan nomor yang tertera pada botol strip.			Alat tes kimia darah POCT.		Idem	
4.	Petugas mengusap jari pasien dengan <i>alcohol swabs</i> dan mengambil sampel darah <i>vena</i> tepi (di ujung jari tangan) dengan menggunakan <i>lancet</i> .			Alcohol swabs, lancet.	1 menit	Idem	
5.	Petugas meneteskan darah ke bilik strip/stik sampai terisi penuh.			Alat tes kimia darah POCT, glucose stick/cholesterol stick/uric acid stick.	1 menit	Idem	
6.	Menunggu proses kerja sampai alat berbunyi "bip" yang menandakan hasil pemeriksaan muncul pada layar			Alat tes kimia darah POCT		Idem	

7. Petugas mencabut strip dari meter, secara otomatis alat akan padam dan hasil tes akan tersimpan dalam memori meter.			Alat tes kimia darah POCT		Idem	
8. Mencatat hasil pemeriksaan pada rekam medis pasien dan melaporkan hasil kepada dokter.			Rekam medis	1 menit	Rekam medis terisi	
9. Memberikan edukasi dan penangangan kepada pasien terkait hasil pemeriksaan.				5 menit	Idem	